

APU8032


最大32系統のガンマ線スペクトロスコピー用デジタルシグナルプロセッシング (DSP) 機能を搭載した計測装置です。検出器のプリアンプ信号を直接入力し、高速ADC(100Msps, 14bit)でデジタル化、FPGAによる台形フィルタを行い、パルス波高値を取得してスペクトルを生成します。計測データはギガビットイーサネット経由でPCへ転送します。複数台時でもリストモードの時間精度を維持したまま計測できます。給電はAC電源コンセントからです。新たにリアルタイム更新可能なスペクトル解析ソフトウェアが標準搭載されました。



APU8032


主な特徴

対象検出器	半導体 シリコン, CdTe, CZT, HPGe 等 シンチレータ LaBr ₃ (Ce), NaI(Tl) 等 比例計数管 等
スループット	> 100kcps
モード	ヒストグラム, リスト, 波形読出
スペクトル解析ソフトウェア付	ガウスフィット解析, ピークサーチ解析

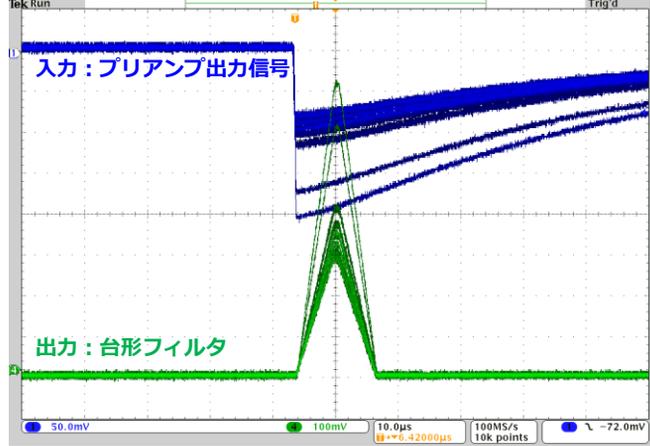


仕様

アナログ入力	32チャンネル, HIFコネクタ レンジ ±1V, 入力インピーダンス 1 kΩ
アナログゲイン	コースゲイン x2, x4
ADC	100Msps, 14bit
ADCゲイン	4k, 2k, 1k, 512, 256 ch.
デジタル信号処理	台形フィルタ rise time 0.16~20µs(0.01µsステップ) flattop time 0.16~2µs(0.01µsステップ) タイミングフィルタ, ベースラインレストアラ, パイルアップリジェクタ 等
デジタルゲイン	コースゲイン x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128 ファインゲイン x0.3333~x1.0000
外部制御	GATE入力, VETO入力, クロック入出力, クリア入力 等, LEMOコネクタ
通信	ギガビットイーサネット, TCP/IP及びUDP
消費電力	AC100V(0.5Amax)~240V(0.25Amax), 50/60Hz
寸法・重量	300(W)x56(H)x335(D) mm, 約3100g
アプリケーション	データ計測制御, スペクトル解析ソフトウェア

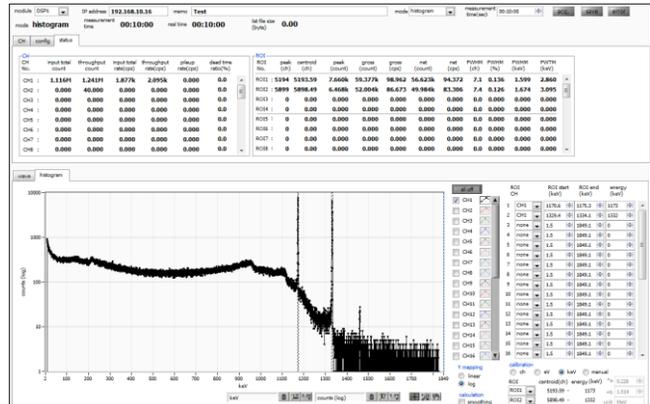

ヒストグラムモード

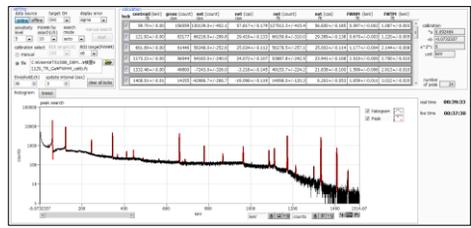

ピークサーチ解析

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

型式: **CBL-HIF-LEMO16**
別売り信号ケーブル, 長さ3m
コネクタ:
左側: LEMO互換16系統分
右側: HIF
※32CH使用時は2式必要です。

